



mindray
healthcare within reach

MobiEye 700

Sistema Móvel de Radiodiagnóstico Visão com Potência e Mobilidade

Atravessa obstáculos verticais de 2cm

2

9 graus de Liberdade

9

Escalada em 12 graus de Inclinação

12

Evolução mais do que imagens

Nada mais intuitivo do que dados quantitativos para demonstrar vantagens claras. O MobiEye 700 comprova superioridade e maior utilidade a cada avaliação de sua qualidade. Aos olhos destes dados, não é apenas inovação – é uma notável evolução dos produtos de radiologia digital.



7

Duração 7 dias

70

Deslocamento 70 km

700

Exposição 700 vezes



Potência

Além dos Limites

Capacidade Superior de Bateria

- A bateria totalmente carregada é compatível com o "Conceito 7, 70, 700"

Gerenciamento de Potência Dual-Mode

- Alimentação da bateria de alta duração
- Corrente de parede para todas as funções

Função de Carregamento Rápido

- 80% da bateria carregada em 2h
- Carga de 5 minutos para 20 exposições

Tecnologia de Mega-Capacitores

- Mantém o equilíbrio de força da corrente
- Reduz a sobrecarga da bateria
- Aumenta a vida útil da bateria



Confiança

Inovação para Confiar

Imagem de Alta Qualidade

- Tecnologia Mindray de Processamento Inteligente da Imagem
- Qualidade clássica e recursos dedicados

Design Anti-colisão

- Sensores embutidos de 270 graus para parada de emergência
- Sensores ultrassônicos duplos para amortecimento do movimento

Tecnologia de segurança do detector

- Sensor de ativação do suporte do detector
- Trava do detector no painel de controle

Indicador LED de Exposição

- Exibe a exposição e o status operacional

Modo de Movimento Auto/Manual

- O modo manual assegura ao equipamento a capacidade de movimentar-se sem energia elétrica



Detector MPX

Produção própria notável

Detector Mindray MPX

- Csl + TFT
- Alto DQE
- Design sem fio

Resistente a líquido e poeira

Sangue e fluidos

- Líquidos & medicações em pó

Diga "NÃO" ao que é pesado

- Pesa apenas 3.3 kg
- Grid opcional para máxima flexibilidade

Fabricação própria

- Carregador automático do detector
- Segurança & Proteção



Mobilidade

Inteligência em todo lugar

Fantástica Mobilidade

- Escalada em 12 graus de inclinação
- Supera obstáculos verticais de até 2cm
- Rotação de 360 graus operado por apenas uma mão
- Regulagem inteligente da velocidade

Mecanismo Biônico de Manipulação Exclusivo

- Design otimizado
- 8 articulações mecânicas de alta flexibilidade

Modo de Controle Múltiplo

- Alça com design ergonômico
- Controle remoto RF para movimentos avançados

Mais Compacto & Leve

- Largura máxima 55cm
- Peso 370 kg

11 Performance

Produtividade com Alta Qualidade

Software Avançado DROC


- Fluxo de trabalho clássico, operações e funções DROC
- Atualização dedicada para tela multi-touch 19"

Configuração de ponta para um sistema otimizado

- HVG fabricado pela Mindray
- Potência 30/50 kV
- Frequência 460kHz inverter

Maior Cobertura de Exames

- Altura máxima diagnóstica 2.3 m
- SID 1.8 para todas as regiões de interesse

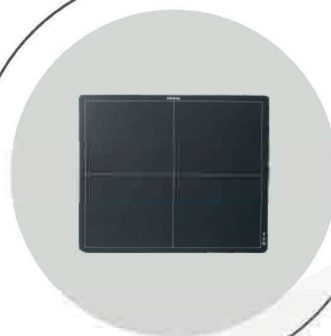

M-Share

Estratégia para Unificação

Combinação de detectores sem fio SG

- Tecnologia inovadora de antena para conexão SG Wifi
- Aquisição e transmissão de dados com velocidade altíssima

Unificação da Família de Radiologia

- Excelente compatibilidade entre os equipamentos fixos e móveis. Soluções eficientes para atualizações.